

ZOOMLITE PRO

See clearer. Brighter. Smarter.

ENGLISH

ZoomLite Pro glasses provide **160% magnification** of objects without distortion, combined with the power of hands-free LED lighting. With a 120-degree field of view, everything appears brighter, sharper and more detailed.

WARNINGS:

- **DO NOT** use ZoomLite Pro as protective eyewear.
- **DO NOT** look directly at the sun while using ZoomLite Pro; this may cause immediate and irreversible damage to your eyes.
- **DO NOT** stare directly into the LED lights. This can cause vision problems.
- **DO NOT** wear ZoomLite Pro while driving.
- **DO NOT** drive while wearing ZoomLite Pro.
- **DO NOT** use alcohol-based cleaners to clean ZoomLite Pro lenses.

ATTENTION: For near vision use only. Ready-to-use glasses, no prescription required, but do not replace corrective lenses prescribed after an eye exam by a professional. Only regular eye exams can determine your vision needs and eye health.

CARE AND CLEANING: To remove dirt and smudges, use the included microfiber cloth or a cloth designed for optical lenses. For heavy dirt, use water and mild soap. **DO NOT** apply pressure while cleaning, as this could scratch the lenses.

INSTRUCTIONS FOR USE: ZoomLite Pro glasses are easy to use. They can be worn alone or over prescription glasses or sunglasses. Press the **ON/OFF BUTTON** located on each arm of the glasses to turn the lights on.

Use over other glasses: When wearing over prescription or sunglasses, adjust the distance to find the right visual point.

BATTERY REPLACEMENT:



↑
Switch: On/Off



* For battery replacement

Battery specifications:

4 batteries per pair of ZoomLite Pro glasses

Model: CR1220 button cell

Type: Li-Mn, <0.3g Li

Voltage: 3.0 V

Capacity: 38 mAh

Do not dispose of electrical products with household waste. Recycle them in appropriate bins and/or according to your local recycling guidelines.

Box contents:

- 2 LED glasses
(2 CR1220 batteries per arm, installed in the arms of the glasses)
- 1 pair of anti-blue light glasses
- 1 multifunctional cleaning spray
- 2 soft cleaning pouches
- 2 cords
- 6 additional CR1220 batteries



ESPAÑOL

Las gafas ZoomLite Pro permiten una **ampliación del 160%** de los objetos sin distorsión, combinado con el poder de la iluminación manos libres. Con su campo de visión de 120 grados, todo se verá más brillante, más nítido y más grande.

ADVERTENCIAS:

- **NO** use ZoomLite Pro como gafas de protección para los ojos.
- **NO** mire directamente al sol mientras usa ZoomLite Pro, esto podría causar daños inmediatos e irreversibles a sus ojos.
- **NO** mire directamente a las luces LED. Esto puede causar problemas de visión.
- **NO** camine mientras usa ZoomLite Pro.
- **NO** conduzca mientras usa ZoomLite Pro.
- **NO** utilice disolventes ni alcohol para limpiar las gafas ZoomLite Pro.

ATENCIÓN: Solo para uso de visión cercana. Gafas listas para usar, disponibles sin receta, no sustituyen a las lentes correctivas recetadas ni exámenes realizados por un especialista. Solo los exámenes oftalmológicos regulares de los profesionales pueden determinar sus necesidades visuales y su salud ocular.

CUIDADO Y LIMPIEZA: Para eliminar la suciedad y las huellas dactilares, utilice el paño de limpieza de microfibra (incluido) o un paño suave especialmente diseñado para lentes ópticas. Para lentes muy sucias, use agua o jabón neutro. **NO** ejerza fuerza al limpiar; esto podría rayar las gafas.


INSTRUCCIONES DE USO: Las gafas ZoomLite Pro son fáciles de usar. Se pueden usar solas, sobre sus gafas graduadas o gafas de sol. Presione el **BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO** ubicado en cada lado a la altura de la sien para encender la luz.

Uso sobre gafas convencionales: Cuando use sobre gafas graduadas o gafas de sol, deje espacio entre el ZoomLite Pro y sus otras lentes para encontrar la distancia focal que funcione mejor para usted.

CAMBIO DE PILAS:



↑
Interruptor: Encendido/Apagado

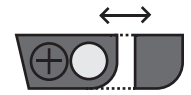

*Para cambiar las pilas

Especificaciones de las pilas:

4 pilas por par de gafas ZoomLite Pro

Modelo: Pila de botón CR1220

Tipo: Li-Mn, <0,3g Li

Voltaje: 3,0 V

Capacidad: 38 mAh

No deseche los productos eléctricos con la basura doméstica. Recícelos depositándolos en contenedores adecuados y/o según las instrucciones de su localidad para el reciclaje.

Contenido de la caja:

- 2 gafas con luz LED
(2 pilas por patilla CR1220 colocadas en las patillas de las gafas)
- 1 gafas con filtro de luz azul
- 1 spray limpiador multifuncional
- 2 fundas suaves limpiadoras
- 2 cordones
- 6 pilas CR1220 adicionales



FRANÇAIS

Les lunettes **ZoomLite Pro** permettent un **grossissement de 160%** des objets sans distorsion, combiné à l'éclairage LED mains libres. Avec un champ de vision de 120 degrés, tout paraît plus lumineux, plus net et plus précis.

AVERTISSEMENTS:

- **NE PAS** utiliser **ZoomLite Pro** comme lunettes de protection.
- **NE REGARDEZ PAS** directement le soleil lorsque vous utilisez **ZoomLite Pro**, cela pourrait causer des dommages immédiats et irréversibles à vos yeux.
- **NE FIXEZ PAS** les lumières LED. Cela peut entraîner des problèmes de vision.
- **NE PORTEZ PAS ZoomLite Pro** en conduisant.
- **NE CONDUISEZ PAS** avec **ZoomLite Pro**.
- **NE NETTOYEZ PAS** les lentilles avec de l'alcool.


ATTENTION : Utilisation uniquement pour la vision de près. Lunettes prêtes à l'emploi sans ordonnance, ne remplacent pas les verres correcteurs prescrits par un professionnel. Seuls des examens réguliers peuvent déterminer vos besoins visuels et votre santé oculaire.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE : Pour éliminer la saleté et les traces, utilisez le chiffon en microfibre inclus ou un chiffon spécialement conçu pour les lentilles optiques. Pour une saleté tenace, utilisez de l'eau et du savon doux. **NE PAS** frotter avec force, cela pourrait rayer les verres.

MODE D'EMPLOI : Les lunettes **ZoomLite Pro** sont faciles à utiliser. Elles peuvent se porter seules ou par-dessus des lunettes de vue ou de soleil. Utilisez-les sur le bout du nez, et **NON** comme des lunettes classiques. Appuyez sur le **BOUTON MARCHE/ARRÊT** situé sur chaque branche pour allumer la lumière.

Utilisation avec d'autres lunettes : Lorsque vous portez des lunettes, ajustez la distance jusqu'à trouver le bon point de vision.

CHANGEMENT DE PILES :

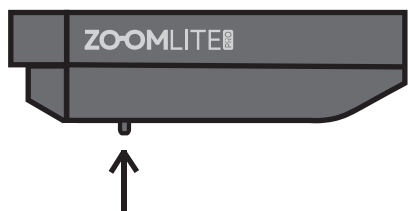

Interrupteur : Marche/ Arrêt



* Pour changer les piles

Spécifications des piles :

4 piles par paire de lunettes **ZoomLite Pro**

Modèle : pile bouton CR1220

Type : Li-Mn, <0,3 g Li

Tension : 3,0 V

Capacité : 38 mAh



Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères. Recyclez-les selon les consignes locales.

Contenu de la boîte :

- 2 lunettes LED
- (2 piles CR1220 par branche, placées dans les branches)
- 1 lunettes avec filtre anti-lumière bleue
- 1 spray nettoyant multifonction
- 2 pochettes de nettoyage douces
- 2 cordons
- 6 piles CR1220 supplémentaires



POLSKI

Okulary ZoomLite Pro zapewniają **160% powiększenie** obiektów bez zniekształceń, w połączeniu z mocą oświetlenia LED bez użycia rąk. Dzięki 120-stopniowemu polu widzenia wszystko wydaje się jaśniejsze, ostrzejsze i bardziej szczegółowe.

OSTRZEŻENIA:


- Tylko do użytku z bliska i do czytania.
- **NIE** dla widzenia na odległość.
- **NIE** stosować jako okularów ochronnych.
- Tylko regularne badania okulistyczne mogą określić Twoje potrzeby wzrokowe i stan zdrowia oczu.
- **NIE** WOLNO prowadzić pojazdów ani obsługiwać pojazdów podczas noszenia tego produktu.
- **NIE** WOLNO patrzeć bezpośrednio w diody LED, gdy produkt jest włączony; może to spowodować natychmiastowe i nieodwracalne uszkodzenie oczu.
- **NIE** WPATRUJ SIĘ w światło diod LED, gdyż może to spowodować problemy ze wzrokiem.
- **NIE** używaj do czyszczenia soczewek środków czyszczących na bazie alkoholu.

UWAGA: Tylko do użytku z bliska. Okulary gotowe do użycia. Nie zastępują soczewek korekcyjnych przepisanych po badaniu okulistycznym. Tylko regularne badania wzroku pozwalają określić potrzeby wzrokowe i stan zdrowia oczu.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE: Aby usunąć brud i smugi, użyj dołączonej ściereczki z mikrofibry lub ściereczki przeznaczonej do soczewek optycznych. W przypadku silnych zabrudzeń użyj wody z łagodnym mydłem. **NIE** naciskaj podczas czyszczenia, ponieważ może to porysować soczewki.

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Okulary **ZoomLite Pro** są łatwe w użyciu. Po prostu załóż je, gdy potrzebujesz powiększenia podczas czytania lub wykonywania zadań z bliska. Naciśnij przycisk **WŁ./WYŁ.** znajdujący się na każdym zauszniku okularów, aby włączyć oświetlenie.

WYMIANA BATERII:

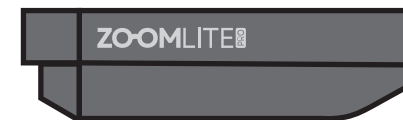

Przycisk: Włącz / wyłącz



*Do zmiany baterii

SPECYFIKACJA BATERII:

4 baterie na parę okularów **ZoomLite Pro**

Model: bateria guzikowa CR1220

Typ: Li-Mn, <0,3 g Li

Napięcie: 3,0 V

Pojemność: 38 mAh



Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z odpadami domowymi. Poddaj je recyklingowi, umieszczając je w odpowiednich pojemnikach i/lub zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA:

- 2 pary okularów LED
- (2 baterie CR1220 na każde ramię, zamontowane w zausznikach okularów)
- 1 para okularów blokujących niebieskie światło
- 1 wielofunkcyjny spray czyszczący
- 2 miękkie woreczki czyszczące
- 2x Regulowane sznurki do okularów
- 6 dodatkowych baterii CR1220



Wyprodukowano w Chinach

Imported by • Importado por
Importé par • Importowane przez

Telemarketing Express Internacional, S.L.
Av. Diagonal, 529, 1-1, 08029, Barcelona, Spain

Batch No.: **XXX-XXXXXX**